



IBC 240

LEISTUNG PUR FÜR
SOLIDA IN FLASCHEN.

FLASCHENLINIE IBC 240

NONSTOP ZÄHLEN, VERPACKEN UND ETIKETTIEREN

Mit der IBC 240 verfügen Sie über ein durchgängiges System zum hocheffektiven Verpacken von Tabletten und Kapseln in Flaschen. Alle Stationen sind auf 6,75 Metern in eine Monoblock-Architektur integriert, optimal aufeinander abgestimmt und zentral via Touchscreen steuerbar. Das System verarbeitet runde, ovale und quadratische Flaschen – mit Höhen von 48 bis 193 mm und Durchmessern von 35 bis 100 mm – gleichermaßen schnell. Der Tablettenzähler ist mit bis zu sieben Zählmodulen erhältlich, für eine maximale Leistung der IBC 240 von bis zu 42.000 Tabletten oder Kapseln pro Minute. Besonderheit der Linie ist der lauf ruhige Transport mittels Förderschnecken, das Mastershift-Register kennt Position und Prozessstatus jeder Flasche und steuert die einzelnen Produktionsschritte. Die Flaschenlinie ist GMP-gerecht in Tischbauweise ausgelegt und modular erweiterbar, um zusätzliche Stationen wie Induktionssiegelstation, Wattebausch- oder Trockenmittelzuführung oder Metalldetektor zu integrieren.

DIE IBC 240: HOCHEFFIZIENT UND PHARMAGERECHT

- **Produktiv:** bis zu 240 Flaschen oder 42.000 Tabletten bzw. Kapseln pro Minute.
- **Abgestimmt:** skalierbare Leistung mit fünf, sechs oder sieben Zählmodulen.
- **Optimiert:** automatisierte Formateinstellungen für schnelle, werkzeuglose Formatwechsel ohne Anfahr- und Justierprozess.
- **Innovativ:** kontinuierlicher, zwangsgeführter Flaschentransport für durchgängigen Produktfluss.
- **Einfach:** intuitives Bedienen aller Stationen über das zentrale Bediensystem.
- **Sicher:** komplett geschlossenes System zum Schutz von Bediener und Produkt.


DETAILS, DIE INS AUGE SPRINGEN. WIR NENNEN ES VORSPRUNG:

1 Zwangsgeführter Flaschentransport über produktschonende Förderschnecken.

2 Leistungsstarkes, skalierbares Tablettenzähl- und -zuführsystem mit 100% Genauigkeit.


3 Servogesteuerte Verschleißeinheit mit Drehmomentkontrolle und einfachem Formatwechsel mittels Stecksystem.

4 Sicherer Auslauf von ausschließlich korrekt befüllten und verschlossenen Flaschen.

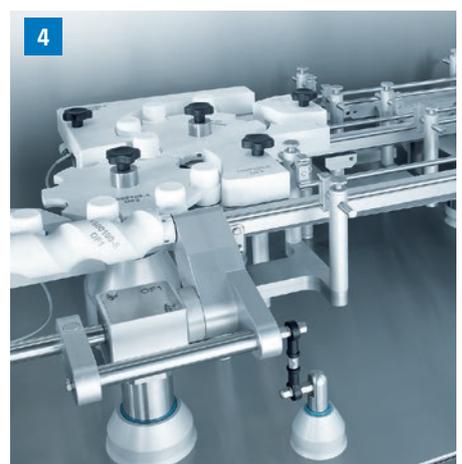

TECHNISCHE DATEN IBC 240

Leistung	max. 240 Flaschen/Min.	Verarbeitbare Flaschenformen	Rund, quadratisch, oval
Zählleistung	max. 42.000 Produkte/Min.	Verarbeitbare Solidaprodukte	Tabletten, Kapseln
Zählgenauigkeit	100 %	Tablettenlänge	2–30 mm
Flaschenvolumen	30–950 ml	Tablettenbreite/ -durchmesser	2–20 mm
Flaschendurchmesser	35–100 mm	Verschlussarten	Schraub- und Aufdrückverschlüsse, kindersichere Kappen
Flaschenhöhe	48–193 mm		
Verarbeitbares Flaschenmaterial	HDPE, Glas		

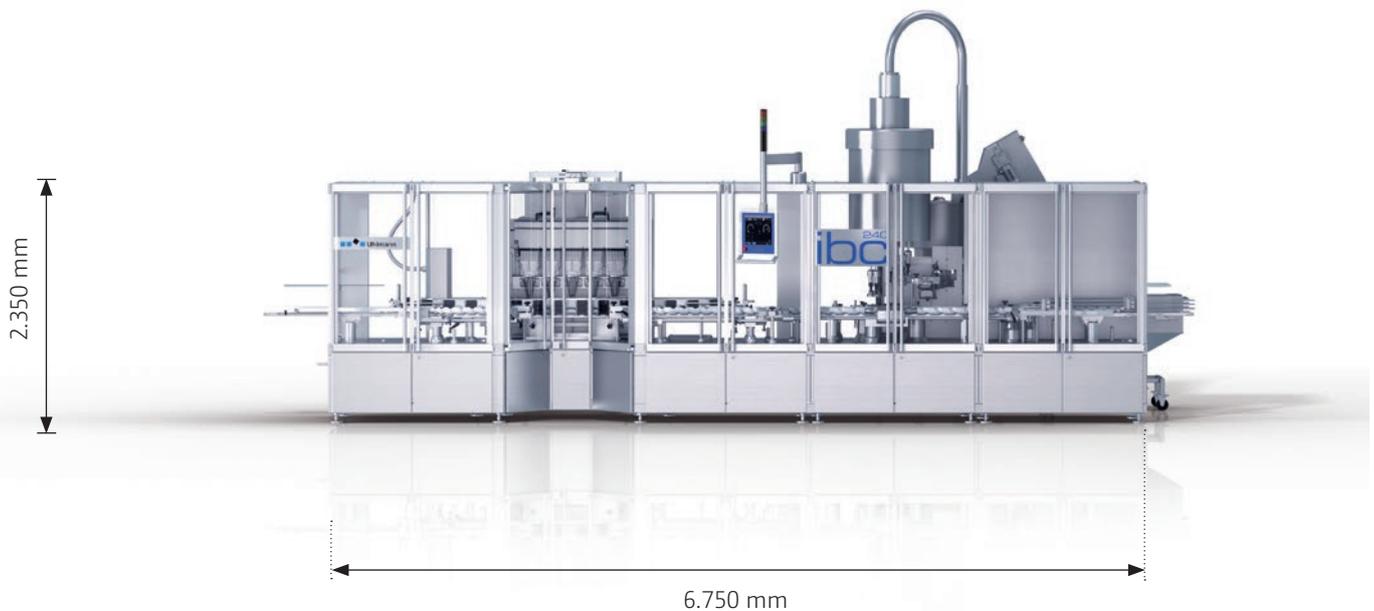

Unsere weltweiten Standorte finden
Sie unter www.uhlmann.de

 A member of
Excellence United

THE **HEARTBEAT** OF PHARMA PACKAGING

**Uhlmann Pac-Systeme
GmbH & Co. KG**
Uhlmannstrasse 14–18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-0
info@uhlmann.de